

目指したのは、ヘッドの向きを変えることで、
患者さんの使いやすさを提案できる歯間ブラシ。

ruscello

the interdental brush on P4 concept

Interdental Brush

ルシェロ 歯間ブラシ ●●●●●●●●



Point. 1

患者さんとの
コミュニケーションで
選べる2つのアングル

指導のなかで使いやすさを実感してもらいヘッドの向きを選択



口腔内の状態や患者さんの器用さ、使い慣れなどを見極めながら指導


患者さんにとって、どちらのアングルが効果的で
使用しやすいかを指導しながら提案できる歯間ブラシです。
この患者さんはアウターアングル？ インナーアングル？



どれが使いやすいかな？




1つのアングルで
使用する場合

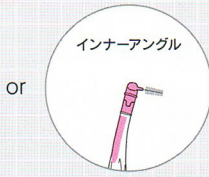

アウターアングルで使用

インナーアングルで使用

2つのアングルを
使用する場合

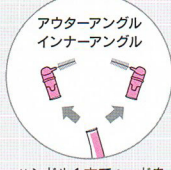

ハンドル1本でヘッドを付替えて使用


ハンドル2本でヘッドを付替えずに使用



このヘッドの向きを「アウターアングル」と呼びます
おすすめの方
● 従来のアングルタイプに慣れている方

このヘッドの向きを「インナーアングル」と呼びます
おすすめの方
● 従来のアングルタイプが苦手な方
● ストレートタイプに慣れているが白歯部の清掃が苦手な方
● 初めて歯間ブラシを使用される方

インナーアングルのひみつ

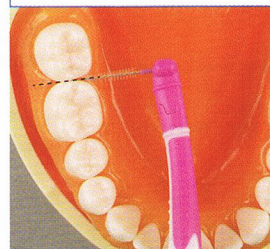

舌側からの挿入は口腔内に入れただけで歯間に入れやすい角度に設計。

ネック部がルシェロ歯間ブラシと同様のカーブのため、歯列に沿って白歯部へアプローチしやすい設計。

リスクの高い臼歯部への使いやすさを追求した歯間ブラシ

Point. 2

臼歯部に使いやすい ロングハンドル& ロングネック

臼歯部にも容易に届く
ロングハンドル&ロングネック



臼歯部に使用した時も口腔内に指が入りにくい設計。

ハンドル部にラバーを採用。またラバー部を30mmにすることで男性でも女性でもしっかり保持できます。

成人の手の大きさを考慮して設計した、安定感のある握りやすいロングハンドル




グリップエンドが手にのせられるので、安定して動かせます。

高強度ワイヤー& ルートコーティングで 耐久性アップ

Point. 3

高強度のワイヤーを採用し、耐久性が従来比25%アップ

■ワイヤー折曲耐久性試験 (0.3mmワイヤー)

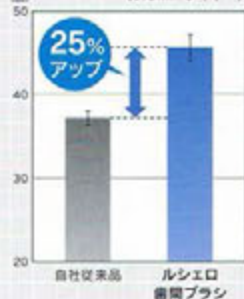

ルートコーティング樹脂がワイヤーの動きに合わせて柔軟にサポート。



(ほぼ原寸大)
写真はSSS

替ブラシ交換が簡単な着脱ケース

着脱ケース



ヘッドの外し方



替ブラシ部分の空いているスペースの上からセットし、ふたを閉め、ハンドルを引き抜きます。

ヘッドの付け方



押しながらカチッ

ハンドルの向きを確認し、ケースをしっかりと押さえながら、カチッと鳴るまでハンドルを差し込みます。

白いラインが隠れるまで確実に!



ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

- 【包装・価格】
- ハンドル.....1本
 - 替ブラシ.....4個 (1個は、ハンドルにセット済)
 - キャップ.....1個
 - 着脱ケース.....1個

種類●7種(4S, SSS, SS, S, M, L, LL)
希望医院価格●各1面(5袋入)=2,000円
希望患者価格●1袋=500円(税込)



ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

- 【包装・価格】
- 替ブラシ.....4個
 - キャップ.....1個
 - 着脱ケース.....1個

種類●7種(4S, SSS, SS, S, M, L, LL)
希望医院価格●各1面(5袋入)=1,050円
希望患者価格●1袋=260円(税込)



※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2013年1月現在のものです。
※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※ルシェロ歯間ブラシの院内採用日は近日発売を予定しています。

近日発売予定!

『ペリオブラシ』

前歯歯間部、
審美補綴物周囲、
歯周ポケットなどに。



特許出願中

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。